

# HINTER-DEM-OHR-HÖRGERÄTE

Anleitung zur Pflege und Bedienung



Sie haben sich für ein Hinter-dem-Ohr-Hörgerät entschieden?  
- **Eine gute Wahl, herzlichen Glückwunsch!**

Damit Sie viel Freude an Ihren Geräten haben, hier ein paar generelle Tipps zu Pflege und Bedienung. Bitte beachten Sie jedoch, dass es je nach Hersteller und Ausführung kleine Abweichungen geben kann.

## BEDIENUNG

### Einsetzen und Herausnehmen

Zum Einsetzen fassen Sie das Hörgerät mit Daumen und Zeigefinger kurz hinter dem kleinen Ohrstück. Schieben Sie dieses in den Gehörgang und platzieren Sie danach das Gehäuse hinter der Ohrmuschel. Mancher bevorzugt auch, erst das Gehäuse hinters Ohr zu setzen und dann das Ohrstück einzuführen. Probieren Sie, was Ihnen am besten passt – auch beim Herausnehmen der Hörgeräte.

Sie haben zwei Hörgeräte? Dann achten Sie bitte darauf, dass jedes ins richtige Ohr kommt. Dabei hilft Ihnen die Markierung am Gehäuse.

**Rot** oder **R** steht für **Rechts**  
**Blau** oder **L** steht für **Links**



Die jeweilige Markierung finden Sie auf der Unterseite des Gehäuses; mitunter ist sie auch in der Batterielade oder auf dem Ohrstück zu finden.



### Hörgeräte mit Einwegbatterien

Die Batterielade Ihres Gerätes ist zugleich der **Ein- und Ausschalter**. Öffnen Sie die kleine Klappe weit genug, so schaltet sich das Gerät aus. Für das Ausschalten muss die Batterie nicht entnommen werden. Schließen Sie die Batterielade, ist das Gerät wieder eingeschaltet. Die meisten Hörgeräte geben dann ein kurzes Einschaltsignal von sich. Sie werden das Signal jedoch nur hören, wenn Sie das Gerät kurz nach dem Einschalten wieder ins Ohr setzen.



Wird die Batterie Ihres Hörgeräts schwächer, so wird Ihnen auch das mit einem Signalton angezeigt. Bitte wechseln Sie die Batterie nun bei nächster Gelegenheit. Nutzen Sie bitte ausschließlich Zink-Luft-Batterien. Vor dem Einsetzen bitte den kleinen Aufkleber von der Oberseite der Batterie entfernen und dann noch ca. eine Minute warten. Die Batterie braucht diese Zeit, damit sie voll aktiviert ist. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Oberseite nach oben zeigt.

Sie hat eine glatte Fläche und ist häufig mit „+“ markiert.



### Hörgeräte mit Akku

Setzen Sie Ihr Hörgerät in die dazugehörige **Ladestation**, so schaltet es sich automatisch aus und der Ladevorgang beginnt. Entnehmen Sie es der Ladestation, so schaltet sich das Hörgerät wieder ein.

Bitte laden sie Ihre Hörgeräte nach jedem Tragen wieder voll auf. Machen Sie es sich am besten zur Gewohnheit, die Geräte vor dem zu Bett gehen in die Ladestation zu setzen, damit sie über Nacht laden. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers.

Gegebenenfalls ist es auch ohne die Ladestation möglich, das Hörgerät ein- und auszuschalten. Bei den meisten Geräten lässt sich dies über längeres Drücken (ca. 5 Sekunden) auf den unteren Taster bewerkstelligen. Auch Akku-Hörgeräte geben in der Regel ein Einschaltsignal von sich. Sie werden das Signal jedoch nur hören, wenn Sie das Gerät kurz nach dem Einschalten wieder ins Ohr setzen.

## REINIGUNG



Bitte verwenden Sie nur solche **Reinigungstücher und Sprays**, die ausdrücklich für Hörgeräte bestimmt sind. Flüssigkeiten bitte niemals direkt auf das Hörgerät sprühen bzw. in Öffnungen eindringen lassen. Tragen Sie die Flüssigkeit immer mit einem Tuch auf. Reinigen Sie das Gehäuse und auch das Ohrstück.




Bei Hörgeräten mit externem Hörer sitzt ein winziger Lautsprecher in Ihrem Gehörgang. Dieser ist mit einem kleinen **Filter** vor Verunreinigungen durch Cerumen (Ohrenschmalz) und Feuchtigkeit geschützt. Der Filter muss jedoch regelmäßig gewechselt werden. Sie können den Wechsel gegebenenfalls selbst vornehmen. Gerne wird das aber auch Ihr Hör-Partner übernehmen.



Bei Hinter-dem-Ohr-Hörgeräten mit Schallschlauch oder Minischlauch ist es außerdem möglich, Ohrstück und Schlauch mit einer **Reinigungstablette** zu pflegen. Man badet sie in einer **Reinigungsdose**, nachdem der Schlauch zuvor abgezogen bzw. aus dem Gehäuse gedreht wird.

### **Achtung: Das eigentliche Hörgerät darf auf keinen Fall mit gebadet werden!**

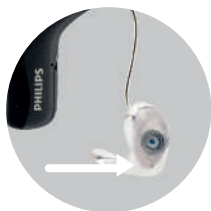

Befüllen Sie die Reinigungsdose mit Wasser und geben Sie eine Reinigungstablette hinzu; beachten Sie bitte auch beiliegende Gebrauchsanweisungen. Ohrstück und Schlauch werden auf einem Sieb in der Flüssigkeit platziert und verbleiben dort mindestens 15 Minuten. Dann werden sie entnommen, mit Wasser abgespült und getrocknet. Flüssigkeitsreste in Schallschlauch und Ohrstück lassen sich mit einem Puster entfernen. Maßgefertigte Ohrstücke von Hinterdem-Ohr-Hörgeräten haben häufig eine **zusätzliche Bohrung**. Sie sorgt dafür, dass immer Luft in Ihr Ohr kommt. Deshalb muss die Bohrung immer offen sein; andernfalls ist Ihr Hör-Erlebnis beeinträchtigt. Bitte lassen Sie sich von Ihrem HörPartner zeigen, wie Sie die Bohrung regelmäßig reinigen sollten.



### **Trocknung**

Feuchtigkeit gefährdet Ihre Hörtechnik. Moderne Hörgeräte sind zwar gut gegen Feuchtigkeit geschützt, aber sie sind auch extremen Belastungen

ausgesetzt: durch Nässe und Regen, durch Schweiß, und das jeden Tag. Daher ist das Trocknen ebenso wichtig wie regelmäßiges Reinigen. Nutzen Sie hierfür am besten die HörPartner **Trockenbox**.

Bei vielen **Akku-Hörgeräten** wird die Technik bereits während des Ladens durch die Ladestation getrocknet. Mitunter empfehlen Hersteller jedoch die zusätzliche Verwendung einer Trockenbox. Bitten Sie gegebenenfalls Ihren HörPartner um weitere Informationen.



### **Vorsicht Badezimmer!**

Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte sitzen so komfortabel, dass man sie oft gar nicht mehr spürt; und das birgt auch Risiken. Vor dem Duschen oder Waschen sollten Ihre Hörgeräte in Sicherheit sein. Auch Haarspray, Cremes oder Make-up sind schädlich für die Technik. Daher: Am besten bei jedem Gang ins Bad zuerst ein Kontrollgriff an beide Ohren.

# FÜR SIE UND IHR HÖRGERÄT NUR DAS BESTE

Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte sind diskret und bieten viele weitere Vorteile.

Jedes Hinter-dem-Ohr-Hörgerät der HörPartner ist ein hochwertiges Unikat. Diese Geräte sind bestens für den Alltag gerüstet. Doch sie brauchen auch gute Pflege.

**Wenn Sie Fragen zu Bedienung und Reinigung Ihrer Geräte haben, dann sprechen Sie uns bitte an.**

Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Hinweise in der Bedienungsanleitung.

---

IHR HÖRPARTNER BERÄT SIE GERN.



UNSERE FILIALEN

HörPartner GmbH

Treskowallee 136 • 10318 Berlin • 0800 0 468 468 • [www.hoerpartner.de](http://www.hoerpartner.de)

Folgen Sie uns schon auf Social Media?

